




Conçue de manière ergonomique, la TAV fournit une surface solide et stable développée spécifiquement pour aider à réduire les vibrations pendant les mesures. Quand elle est utilisée en tandem avec une balance, la table permet à la balance de fonctionner avec une précision considérable malgré les courants d'air ou les mouvements qui pourraient causer des fluctuations dans les lectures. La TAV est facile à assembler et est livrée avec tous les outils nécessaires. La surface de travail interne mesure 15.7" x 17.7" / 400 x 450mm, ce qui permet amplement d'espace pour une balance. Sa grande dalle de granit résistante aux rayures est située sur un support en caoutchouc qui absorbe les chocs, tandis que les pieds de nivellement accommodent les surfaces inégales. La balance tient au milieu de la surface en granit de la TAV, stabilisant la base et permettant une précision accrue.

La solution la plus intelligente pour réduire les vibrations pendant le pesage

Caractéristiques

- Construction à deux tables maintient le bloc de granit au milieu et réduit les interférences
- Grande surface de travail de 400 x 450mm
- Dalle de granit résistante aux rayures
- Espace supplémentaire autour de la dalle de vibration pour les échantillons reposants
- Armature tubulaire légère en aluminium
- Pieds de nivellement ajustables pour les surfaces inégales
- Poids total de la table et de la surface de travail: 55kg

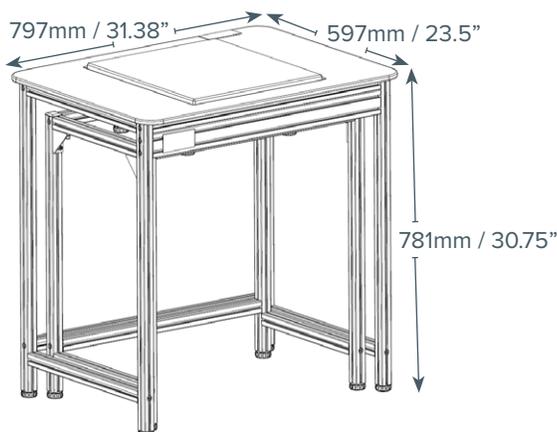

A Propos D'Adam Equipment

Depuis plus de 40 ans, les professionnels du monde entier font confiance à Adam Equipment pour une vaste gamme d'équipements de pesage fiable et abordable. Adam offre la balance idéale en vitesse, performance et valeur

Fourni par